



# Ruinette

Version juin 2023

Numéro de téléphone                      Le numéro est le

---

Vos contacts devraient enregistrer le numéro de votre appareil, par exemple « Appel urgence maman »

## Description pour le/la bénéficiaire de la montre

Le système d'appel à l'aide Ruinette est destiné aux personnes qui souhaitent veiller à leur propre bien-être. Il offre des fonctions de sécurité automatiques avancées et une connexion vocale 24h/24h et 7j/7j avec la famille et les amis ou/et au centre d'urgence de Gentianes, selon votre abonnement.

Ruinette vous permet de demander de l'aide par téléphone en appuyant sur le bouton d'alarme du bracelet-émetteur ou sur le bouton central bleu de la base du Ruinette ou encore sur le bouton bleu du module portable. Vous pourrez communiquer avec vos proches ou/et la centrale de Gentianes par le biais du haut-parleur qui se trouve uniquement sur la base ou sur le module portable (Le bracelet émetteur ne comprend pas de micro).

## Pour déclencher un appel à l'aide


1. Appuyer sur le bouton d'alarme du bracelet-émetteur, du module portable ou de la station de recharge pendant 2 secondes. La station de recharge ou le module émet des bips et l'appel est lancé. Une alarme déclenchée ne peut pas être stoppée.
2. Attendez que l'appel soit répondu.

Lorsqu'un appel de demande d'assistance est initié, le système contacte les personnes définies lors de la signature du contrat. Si le premier aidant ne répond pas, le système appelle l'aidant suivant dans la liste et continue jusqu'à ce que quelqu'un réponde à l'appel. Selon le réseau mobile et le nombre d'aidants, le temps de connexion de l'appel peut varier. Généralement, l'appel est répondu entre 30 secondes et 1 minute si le premier aidant de la séquence d'appel est disponible.

Nous vous conseillons de faire un test 1x par mois avec votre bracelet-émetteur) en déclenchant un appel à l'aide (pas de frais).

## Caractéristiques techniques

1. Insérer le module portable jusqu'à ce que la lumière bleue s'allume.
2. La lumière bleue allumée indique que le module est dans la station de recharge, haut-parleur en service.
3. En cas de besoin, retirer le module portable en maintenant légèrement la base.
4. La lumière bleue éteinte indique que le module n'est plus dans la station de recharge.

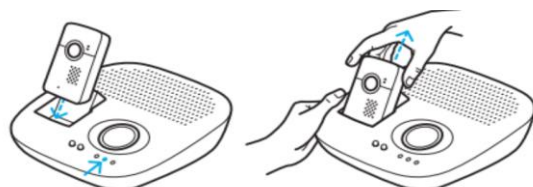

Laisser votre base branchée sur le réseau électrique, même si vous ne l'utilisez pas immédiatement car ce n'est qu'ainsi que l'appareil fait l'objet d'une surveillance technique.

Autonomie du module portable lorsque totalement chargé : environ 10 heures.

Étanchéité du bracelet-émetteur : 100 % (IP 67). Vous pouvez le garder à votre poignet en tout temps du jour et de la nuit.

Portée du bouton d'appel d'urgence du bracelet-émetteur : max 150 m de la base de recharge ou du module.

Alimentation de secours avec accumulateur rechargeable d'une autonomie allant jusqu'à 24 heures.

Les coordonnées GPS ne peuvent être communiquées que si la personne se trouve à l'extérieur.

La précision dépend de l'emplacement de l'appareil au moment de l'alarme

- 
- 1 Bouton d'alarme
  - 2 Clignote en vert = tout est OK  
Vert allumé = batterie en charge
  - 3 Clignote en jaune = aucune réception mobile  
Clignote en rouge = batterie presque vide
  - 4 Haut-parleur
  - 5 Microphone
- 
- 7 Haut-parleur
  - 8 Connecteur électrique
  - 9 Baisser le volume du haut-parleur en appuyant
  - 10 Monter le volume du haut-parleur en appuyant
  - 11 Vert allumé = station de recharge raccordée au courant
  - 12 Bleu allumé = Flex dans la station de recharge

